

## Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema CGM APP – paleidimo vadovas

### i3 CGM sistemos apžvalga

Išsamias sistemos instrukcijas ir informaciją rasite savo vartotojo vadove.

Vartotojo vadovas pateikiamas elektronine forma. Galite apsilankyti [iCan-cgm.com](http://iCan-cgm.com) svetainėje ir atsisiųsti PDF.

Jei jums reikia spausdintinės vartotojo vadovo kopijos, susisiekite su pardavėju arba atsiųskite užklausą el. pašto adresu [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com).

Jis bus suteiktas per septynias dienas nemokamai.


Jei turite klausimų, atsiųskite el. laišką adresu [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com)

Visa grafika yra reprezentacinė. Jūsų produktas gali atrodyti kitaip.

#### Jutiklio rinkinys



#### Jutiklių paketas

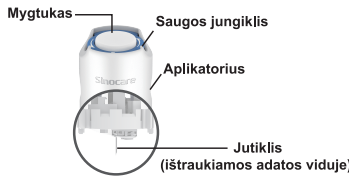


#### Siųstuvų paketa

##### Siųstuvu



##### Siųstuvu dėklas

#### iCan CGM APP

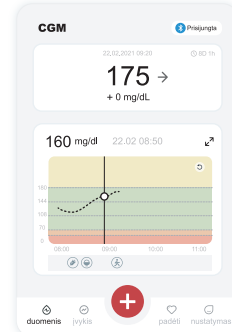

- 1 Pasiruoškite
- 2 Nustatykite Mobile App
- 3 Jutiklio įvedimas
- 4 Pradėti stebėjimą
- 5 Stebėjimo pabaiga

## 1 Imkitės darbo


### 1 žingsnis: Įdiekite iCan CGM App

Atsisiųskite programėlę iCan CGM APP App Store arba Google Play.



### 2 žingsnis: Prisijunkite prie savo iCan CGM paskyros

a. Prisijunkite, jei jau turite paskyrą.  
b. Bakstelėkite „Registruotis“ apačioje, jei nesate naujokas sistemoje. Programėlė parodys informacinius vaizdo įrašus ir ekranus. Bakstelėkite „Kitas“, kad tęstumėte, kol pateksite į QR kodo nuskaitymo puslapį. Laikykite savo programą atidarytą visą laiką.

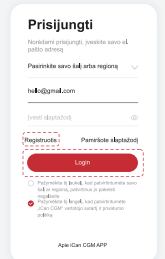


## 2 Susiekite su siųstuvu

### 1 žingsnis: Ištraukite siųstuvų paketą

#### Jutiklių paketas




#### Siųstuvų paketa

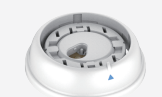

Atskirai

### 2 žingsnis: Patikrinkite SN (serijos numerį), kad atitiktų kodus

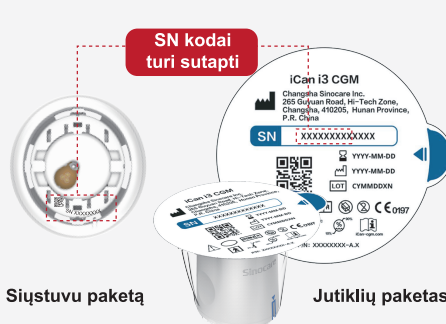

#### Siųstuvų paketa

#### Jutiklių paketas

### 3 veiksmas: Susiekite su siųstuvu



- Įsijunkite programėlę ir įsitikinkite, kad turite įjungę „Bluetooth“ ryšį.
- Prisijunkite prie savo paskyros ir naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą jutiklių pakete.
- Poravimas vyksta automatiškai. Neuždarykite programėlę ir laikykite ją 6 metrų atstumu, kol pereisite prie kito veiksmo. Jei SN kodą įvedėte rankiniu būdu, spustelėkite „Kitas“, kad tęstumėte.
- Laikykite telefoną šalia ir paruoškite įterpimą kitam veiksmui

Iš jutiklio paketo dėžutės apačios išsitraukite siųstuvų paketą.


Prieš pradėdami sieti jutiklį su siųstuvu patikrinkite, ar sutampa jutiklio paketo ir siųstuvų pirmieji 8 serijos numerio skaitmenys.

## 3 Jutiklio įvedimas

Norėdami sužinoti, kaip įdėti jutiklį, vadovaukitės pakuotėje esančiu „Nuolatinės gliukozės stebėjimo sistemos greitos pradžios vadovu“.


## 4 Pradėti stebėjimą

### 1 žingsnis: Paleiskite CGM jutiklį

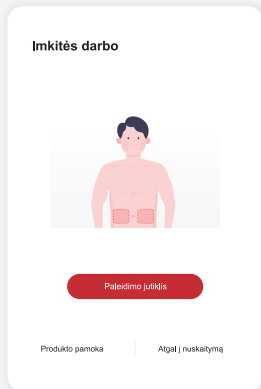


Kai jutiklis bus sėkmingai įdėtas, jūsų CGM App paragins jus paleisti jutiklį. Norėdami atlikti kitą veiksmą, bakstelėkite „Pradėti“.

### 2 žingsnis: Palaukite, kol jutiklis sušils

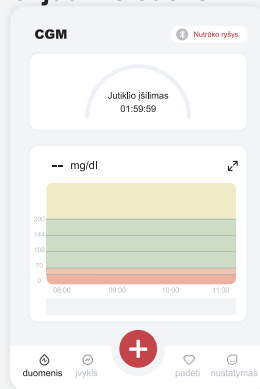

Bakstelėkite „Pradėti“, kad pradėtumėte 2 valandų jutiklio įšilimą. Gliukozės rodmenų ar įspėjimų nebus, kol nesibaigs apšilimas. Kai jutiklis įkaista, programėlė turi būti atidaryta, o išmanusis įrenginys – 20 pėdų atstumu nuo siųstuvu.

### 3 veiksmas: Nustatyti įspėjimus

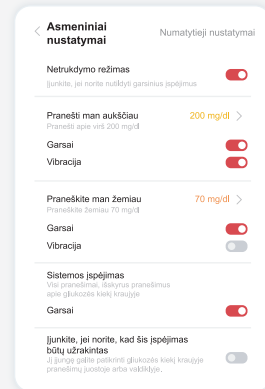

**Dėmesio:** Pagal numatytuosius nustatymus visada gausite įspėjimą apie skubų žemą gliukozės kiekį, kai jutiklio gliukozės vertė bus 55 mg/dL arba mažesnė. Išsamios informacijos apie įspėjimus apie gliukozės kiekį ir sistemos sąranką rasite naudojimo instrukcijoje „Svarbi saugos informacija“.


#### Gliukozės tendencijos rodyklė

Kokia kryptimi juda gliukozė

Rodyklė	Kas yra reiškia	Rodyklė	Kas yra reiškia
↑	Sparčiai didėja gliukozė	↘	Glucose falling slowly
↑	Greitai pakyla gliukozė	↓	Glucose falling quickly
↗	Lėtai didėja gliukozė	↘	Glucose falling rapidly
→	Gliukozė pastovi		

#### Gliukozės grafikas

Dabartinių ir saugomų gliukozės rodmenų grafikas

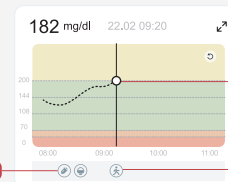

Pastaba apie insuliną

Sportinė pastaba


### 4 veiksmas: Patikrinkite gliukozę



## 5 Stebėjimo pabaiga


### 1 žingsnis: Patvirtinkite, kad dabartinė sesija baigta

Pasibaigus 15 dienų stebėjimo seansui, programėlė paragins pakeisti naują jutiklį arba peržiūrėti istorijos ataskaitą.

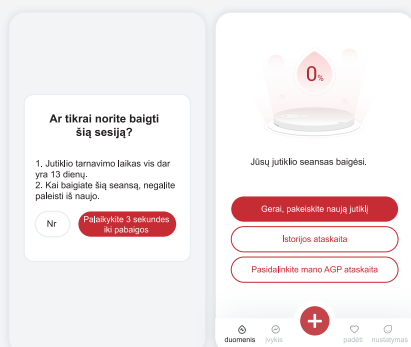

### 2 žingsnis: Ištraukite jutiklį

a. Atplėškite lipnios juostos kraštelį.  
b. Tolygiu judesiu lėtai nulupkite lipnią juostą nuo odos.

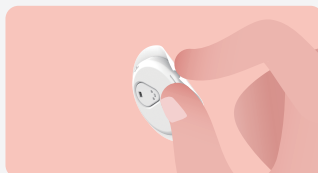

### 3 veiksmas: Išmetimas

Nelieskite jutiklio ir išėmus jutiklio negalima pakartotinai naudoti. Panaudotą jutiklį išmeskite pagal jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančias šiukšlių tvarkymo taisykles.

